

## INSTRUKCJA OBSŁUGI IRYGATORA WP-560/562/563 WRAZ Z GWARANCJĄ


Dziękujemy za wybranie irygatora modelu WP-560/562/563. Jego doskonała zdolność do masażu dziąseł oraz oczyszczania bardzo trudno dostępnych przestrzeni w jamie ustnej została potwierdzona przez badania kliniczne. Udowodniono naukowo, że irygator **WATER PIK** pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz usunąć resztki pożywienia i bakterie z tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne środki do płukania i czyszczenia nie mogą dotrzeć.

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

W przypadku każdego urządzenia elektrycznego należy zawsze, szczególnie w obecności dzieci stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.

**UWAGA-** W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń lub uszkodzeń ciała należy:

- Dokładnie poinstruować i dopilnować dzieci oraz osoby specjalnej troski o właściwym użytkowaniu urządzenia.  
**PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.**
- Nie należy kierować strumienia wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Bez odpowiednich końcówek zalecanych przez Waterpik Technologies, to urządzenie jest zdolne do wytworzenia ciśnienia, które może spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach.
- Nie należy używać baterii litowych (akumulatory litowe) w tym produkcie. Akumulatory te są zdolne do wytwarzania ciśnienia, które mogą powodować uszkodzenie urządzenia. Zastosowanie baterii litowych powoduje utratę gwarancji.
- Używać to urządzenie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją lub zalecany przez stomatologa.
- Używać wyłącznie z końcówkami które są zalecane przez Waterpik Technologies.
- Należy napełniać zbiornik wodą lub płynami przepisany przez stomatologa.
- Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
- Nie włączać ani nie używać w miejscu, gdzie stosowany jest tlen lub preparaty w aerozolu.
- Nie używać płynów do ust/płukanek które zawierają JOD lub wybielacze.
- Usunąć biżuterię ustną przed użyciem produktu
- Nie używać, jeśli masz otwartą ranę na języku lub w ustach
- Jeżeli lekarz zalecił, leki do premedykacji przed zabiegami stomatologicznymi, należy skonsultować się z dentystą przed użyciem tego produktu lub innego urządzenia do higieny jamy ustnej.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem

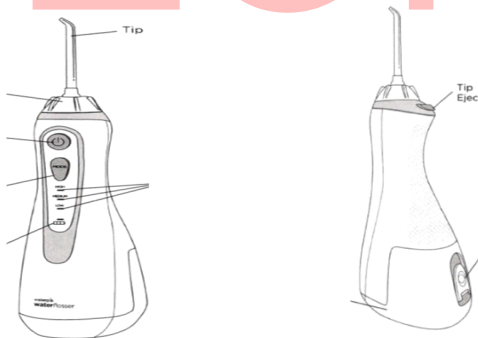

### CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Każdorazowo po przeprowadzeniu irygacji dowolnym płynem, urządzenie powinno zostać przepłukane. W tym celu należy napełnić zbiornik ciepłą wodą z kranu, skierować końcówkę irygatora do umywalki, a następnie włączyć urządzenie aż do opróżnienia się zbiornika.
- Do czyszczenia, dezynfekcji i usuwania kamienia kotłowego zalecamy stosowanie preparatu **REDESEPT®**. Preparat jest dostępny w miejscu zakupu irygatora.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką

## SERWIS i GWARANCJA 12 miesięcy

**POLKARD Bis Sp. z o.o.** gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu **1-go roku** od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć oryginał dowodu zakupu urządzenia. **POLKARD Bis Sp. z o.o.** naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARD BIS Sp. z o.o. ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850** w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

### Producent:



1730 East prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001  
USA

### Dystrybucja w Polsce



Polkard Bis Sp. z o.o.  
Ul. Marka Kotańskiego 2  
10-166 Olsztyn  
Tel/fax. 089/5338777  
[www.polkardbis.pl](http://www.polkardbis.pl)  
e-mail: [biuro@polkardbis.pl](mailto:biuro@polkardbis.pl)

Data zakupu:.....

Nr seryjny .....

WZÓR

Pieczęć i podpis sprzedawcy