



MASSAGGIO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Fotela masującego Massaggio Eccellente

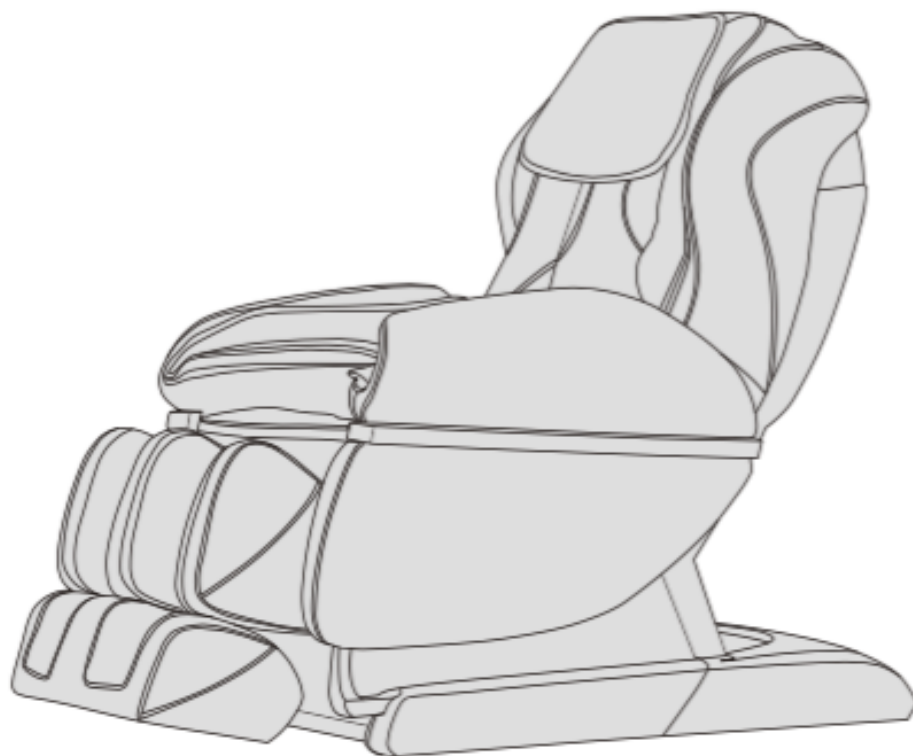

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE.....	2
SCHEMAT FOTEŁA	3
FUNKCJE I DZIAŁANIE	4
MONTAŻ.....	10
SPECYFIKACJA PRODUKTU.....	12

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE

1. Bezpieczeństwo

- Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
- Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej fotela masującego.
- Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
- Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
- Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
- Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
- Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu posiłku.
- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.

3. Przeciwwskazania

- Cięża.
- Do pół roku po operacji.
- Brak zgody lekarza.


4. Konserwacja i serwisowanie

- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

5. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.
 - Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
 - Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.
- Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy braku doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

SCHEMAT FOTEŁA

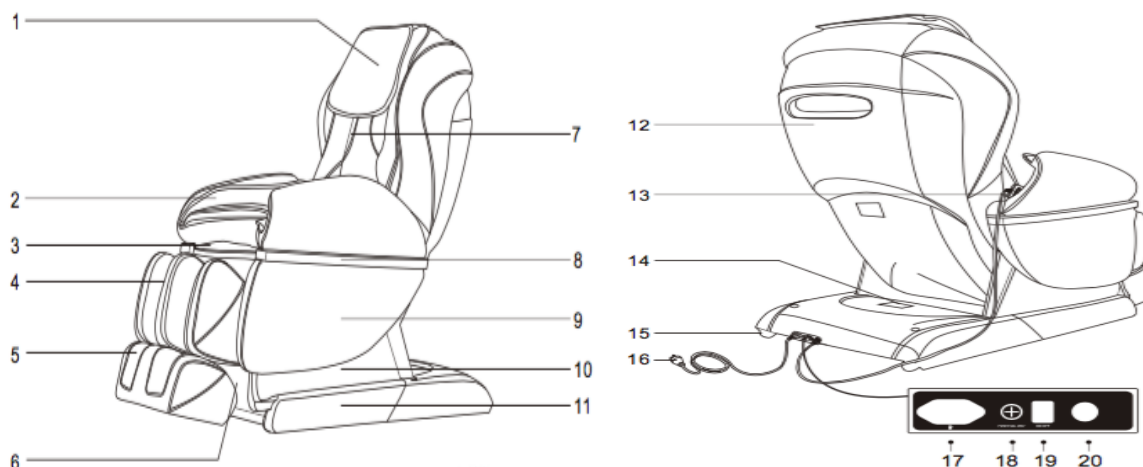

1. Poduszka pod głowę
2. Masażer przedramion
3. Siedzisko
4. Masażer łydek
5. Masażer stóp
6. Osłona przednia
7. Oparcie
8. Element dekoracyjny
9. Podłokietnik
10. Osłona boczna

11. Osłona mechanizmów
12. Osłona tyłu
13. Pilot
14. Osłona sterownika
15. Rółka
16. Przewód zasilający
17. Gniazdo zasilania
18. Bezpiecznik
19. Włącznik
20. Gniazdo pilota

FUNKCJE I DZIAŁANIE

- Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących.
- Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu.
- 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem).
- 5 programów automatycznych: Relax, Comfort, Decompress, Neck & Shoulder, Back & Waist.
- Możliwość zapisania 3 własnych programów automatycznych.
- Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu.
- Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu w 3 poziomach.
- Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie masażu rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie - 3 poziomy.
- 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, ramiona, nogi.
- Zero Gravity - możliwość komfortowego ułożenia w fotelu masującym.
- Funkcja Zero Wall, technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas masażu poprzez ustawienie fotela masującego tuż przy ścianie, bez konieczności zabierania miejsca na rozkładanie oparcie.
- Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 3 poziomy.
- Podnóżek dopasowuje się do wzrostu.
- Ogrzewane oparcie promieniami podczerwonymi.
- Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji siedzącej.



1. POCZĄTEK MASAŻU



- Włącz fotel, przelączając włącznik w pozycję ON.




Schemat podłączenia wtyczki

Schemat włączników

- Wciśnij czerwony przycisk (Power).
- Mechanizm przeprowadzi skanowanie linii kręgosłupa oraz wyszuka najwyższy punkt górnych partii ciała, do którego będzie odbywać się masaż.
- Jeżeli mechanizm nie jest dopasowany do pozycji ramion można go ustawić za pomocą przycisków podnoszących lub opuszczających mechanizm, istnieje 10 poziomów. Program automatyczny uruchamia się po 10 sekundach od ustawienia wysokości ramion.

	Przesuń mechanizm do góry, aby osiągnąć poziom ramion
	Przesuń mechanizm w dół, aby osiągnąć poziom ramion

Dopasowanie mechanizmu do poziomu ramion

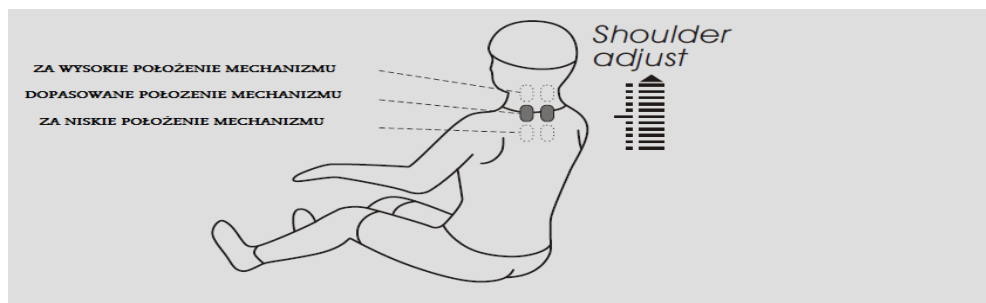








2. WYBÓR MASAŻU

Tryby automatyczne masaży




Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Relax	Głęboki masaż, relaks w obszarach bólu	AUTO F1
Comfort	Spokojny masaż, rozluźniający mięśnie	AUTO F2
Decompress	Masaż wspomagający krążenie krwi	AUTO F3
Neck & shoulder	Masaż skoncentrowany na górnych odcinkach kręgosłupa	AUTO F4
Back & waist	Masaż skoncentrowany na dolnych odcinkach kręgosłupa, pośladkach oraz udach	AUTO F5



Techniki masażu górnych partii ciała

Nazwa	Przycisk	Wyświetlacz	Możliwość dopasowania masażu pod względem
Dogłębne uciskanie - Shiatsu	SHIATSU		Prędkość (speed), rozpiętość (width)
Ugniatania	RNEAD		Prędkość (speed)
Oklapywanie	TAP		Prędkość (speed), rozpiętość (width)
Ugniatanie z oklepywaniem	RNEAD & FLAP		Prędkość (speed)
Rozbijanie	RNOCK		Prędkość (speed), rozpiętość (width)


Szybkość	SPEED		3 poziomy szybkości
Szerokość	WIDTH		3 poziomy szerokości

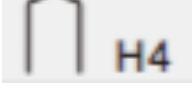Dopasowywanie pozycji masażu manualnego

Przycisk	Opis	Wyświetlacz
	Stała pozycja masażu (fixed), punktowy	
	Mały obszar masażu (partial), częściowy	
	Całościowy masaż pleców (overall)	
	Masaż górnych partii ciała	
	Masaż dolnych partii ciała	


	Ustawienie pozycji mechanizmu masującego (pomiędzy punktowym i częściowym masażem)	Przesuwa mechanizm w górę
		Przesuwa mechanizm w dół

Masaż za pomocą poduszek powietrznych




Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała	FULL AIR	Masaż poduszkami na ręce oraz nogi	

Masaż poduszkami powietrznymi ramion	ARM	Masaż poduszkami na ramiona	
Masaż poduszkami powietrznymi nóg	LEG	Masaż poduszkami na nogi	
Intensywność poduszek powietrznych	AIR PRESSURE INTENSITY	3 stopniowa możliwość regulacji intensywności poduszek powietrznych	

Inne manualne funkcje

Funkcja	Przycisk	Opis	Wyświetlacz
Podgrzewanie	BACK HEAT	Ogrzewanie oparcia promieniami podczerwonymi, odczuwalne po trzech minutach	

Funkcje ustawienia fotela

Funkcje	Przycisk	Opis
Fotel ustawia się w pozycji siedzącej		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie wracać do pozycji siedzącej do momentu, w którym puścisz przycisk. Jeżeli osiągniesz maksymalną pozycję fotel wyda sygnał dźwiękowy.
Fotel ustawia się w pozycji leżącej		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie schodził do pozycji leżącej do momentu, w którym puścisz przycisk. Jeżeli osiągniesz maksymalną pozycję fotel wyda sygnał dźwiękowy.
Zero Gravity		Włączając ten przycisk fotel przechodzi do pozycji Zero Gravity.

3. KOŃCZENIE MASAŻU

Aby zakończyć masaż, przed upływem czasu na jaki został zaprogramowany, wciśnij czerwony przycisk. Masaż zostanie natychmiast zatrzymany, podnózek i oparcie powróci do pozycji siedzącej.

Po upływie zaprogramowanego czasu masaż zostanie zatrzymany, a fotel masujący pozostanie w wybranej pozycji.

4. ZAPAMIĘTYWANIE MASAŻU


- Po zakończeniu wybranego programu lub podczas wyłączenia urządzenia, na pilocie wyświetli się informacja "Memory", przypominająca użytkownikowi o możliwości zachowania w pamięci przeprowadzonego masażu.
- Wciśnij przycisk M, M2 lub M3, aby zachować przeprowadzony masaż w jednej z trzech pamięci.

Funkcja	Przyciski	Wyświetlacz
Zapamiętane masáže	M1	SA 1 Memory
	M2	SA 2 Memory
	M3	SA 3 Memory


MONTAŻ

1. INSTALACJA PODNÓŻKA

- Wyciągnij fotel z foli (Rysunek 1), wyciągnij przewody z otworu (Rysunek 2).

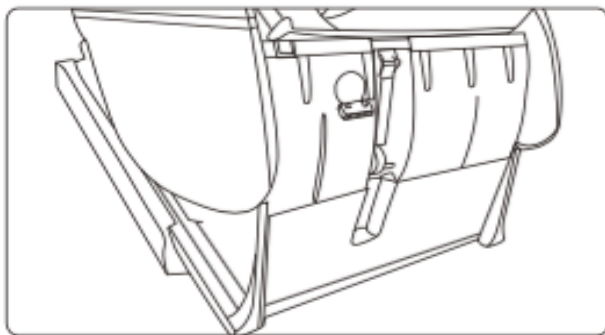


Rysunek 1

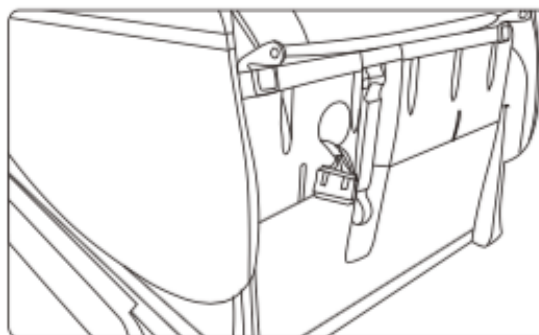


Rysunek 2

- Włącz fotel, następnie pilotem ustaw go w odpowiedniej pozycji, tak aby wpasować do siebie otwory dwóch wsporników (Rysunek 3).
- Przelóż bolec przez otwory dwóch wsporników i zabezpiecz zawleczką (Rysunek 4).

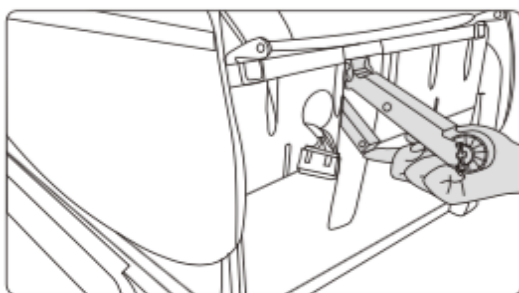

Rysunek 3

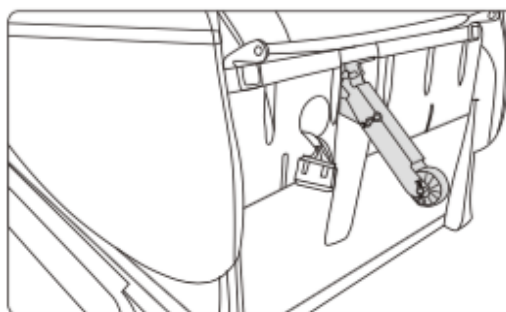


Rysunek 4

- Podnóżek fotela masującego jest osobno montowany.
- Przy siedzisku fotela masującego widoczne są dwie wypustki, które służą do połączenia fotela z podnóżkiem (Rysunek 1).
- Przyłóż podnóżek do siedziska i wpasuj oczka widoczne przy górnej części podnóżka do wcześniej zlokalizowanych wypustek przy siedzisku (Rysunek 2).




Rysunek 1

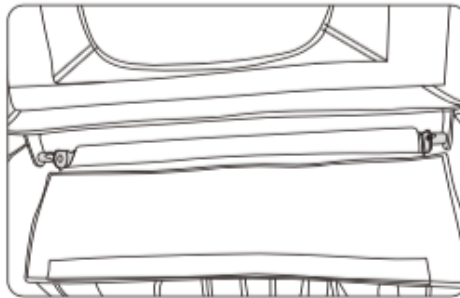


Rysunek 2

- Wpasuj dwa elementy (wypustkę z oczkiem) zarówno z prawej jak i lewej strony (Rysunek 3).
- Przełóż z dwóch stron zawleczkę przez widoczny w wypustce otwór. (Rysunek 4).

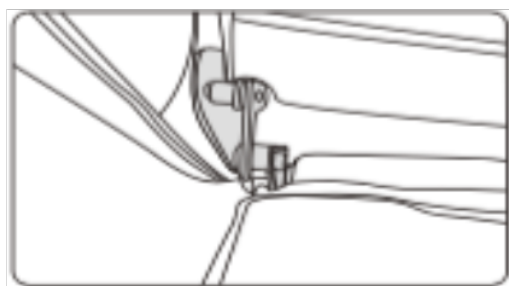



Rysunek 3

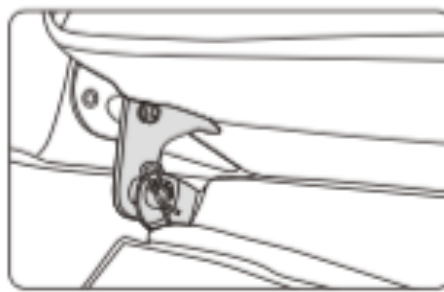

Rysunek 4


2. DEMONTAŻ PODUSZKI

- Używanie poduszek może zredukować intensywność masażu ramion i szyi. Możesz zdecydować, którą z poduszek chcesz zdemontować (rekomendowane jest używanie poduszki osłaniającej głowę).
- Pokrycie oparcia demontowane jest za pomocą zamka błyskawicznego (Rysunek 1).
- Poduszka ochraniająca głowę demontowana jest za pomocą rzepu (Rysunek 2).

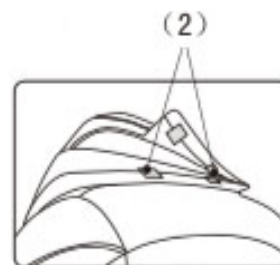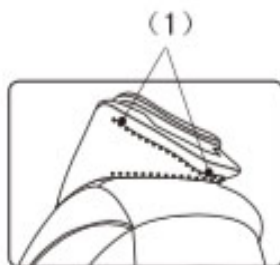

3. PODŁOŻE

Używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywaników, bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.

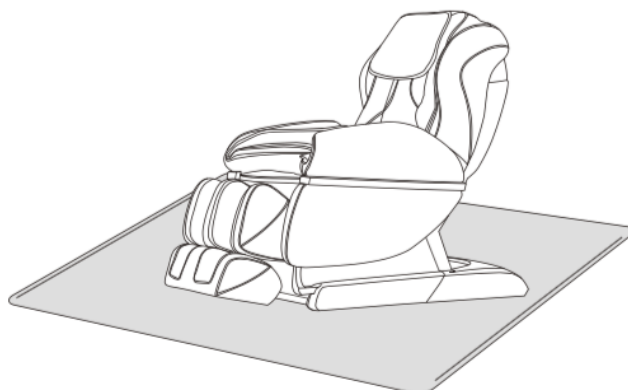

4. PRZENOSZENIE FOTEŁA

Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej).



SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Model: Massaggio Eccellente.
- Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz.
- Pobór mocy: 150 W.
- Rekomendowany czas użytkowania: 20 min.