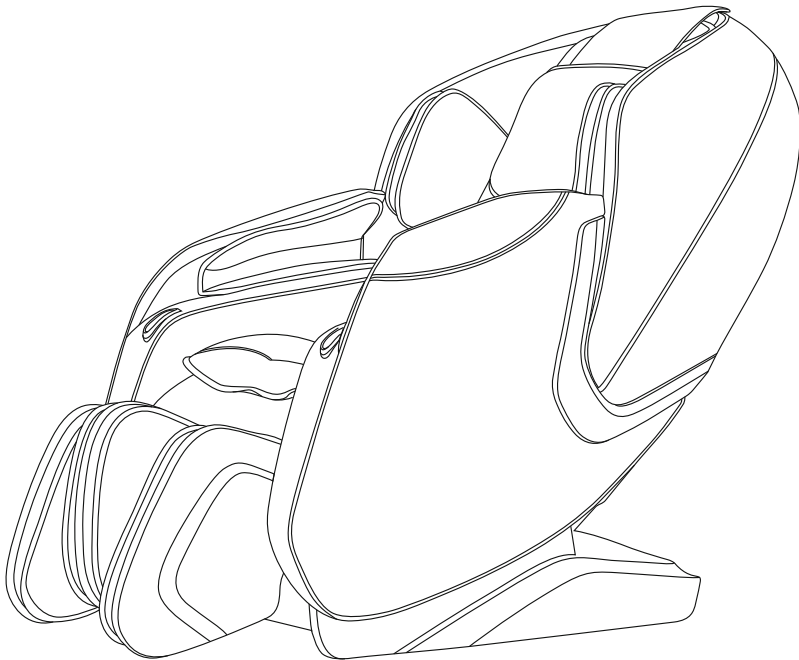



MASSAGGIO®

Massaggio Eccellente 2 Pro

Instrukcja obsługi



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego poznać wszystkie jego funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

Spis treści

Bezpieczeństwo i konserwacja	02
Ostrzeżenia bezpieczeństwa	04
Schemat fotela	06
Funkcje	07
Sposób użytkowania	08
Specyfikacja	16

Bezpieczeństwo i konserwacja

1. Ważne uwagi co do bezpieczeństwa



- Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego.
- Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu.
- Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.
- Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane.
- Nie używaj fotela masującego na zewnątrz.
- Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
- Wszelkie inne zastosowania, które nie są wymienione w niniejszej instrukcji, są zabronione.
- Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania.
- Nie używaj fotela, jeśli skóra lub pokrywa jest zepsuta lub uszkodzona.
- Nie używaj go, jeśli otwór chłodnicy jest zakryty lub zablokowany.
- Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym.
- Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz.
- Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku.
- Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.

2. Środowisko

- Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci powietrza.
- Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.
- Nie używaj fotela masującego w miejscach, gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź cyrkulacji powietrza.

3. Przeciwwskazania do korzystania z fotela masującego.

- Osoby cierpiące na osteoporozę nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Osoby cierpiące na choroby serca lub noszące elektroniczny sprzęt medyczny, taki jak rozrusznik serca, nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Osoby z gorączką nie powinny korzystać z fotela masującego.
- Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie menstruacyjnym nie powinny korzystać z tego fotela masującego.
- Osoby, które doznały obrażeń lub chorób skóry, nie powinny korzystać z tego produktu.
- Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby niezrównoważone umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia.
- Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują, nie powinny korzystać z tego produktu.
- Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu.
- Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

Bezpieczeństwo i konserwacja

4. Bezpieczeństwo

- Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu.
- Nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
- Uważaj na uszkodzenie przewodów.
- Nie używaj mokrej ściereczki do czyszczenia części elektrycznych, takich jak przełącznik i wtyczka.
- Nie zbliżaj się do produktu podczas odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń, jeśli nagle nastąpi powrót zasilania.
- Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta.

5. Konserwacja

- Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia fotela masującego.
- Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
- Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go i umieść w suchym pomieszczeniu.
- Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
- Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
- Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.

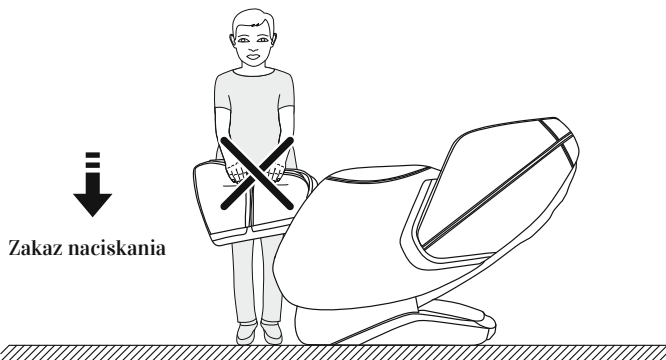
6. Rozwiązania zwykłych usterek

- Naturalnym jest odgłos pracujących silowników w momencie używania fotela masującego.
- Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź, czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
- Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


Uwaga

Podczas podnoszenia podnóżka nie powinno się na niego naciskać, aby uniknąć przechylenia fotela masującego do przodu lub jego uszkodzenia.



Uwaga

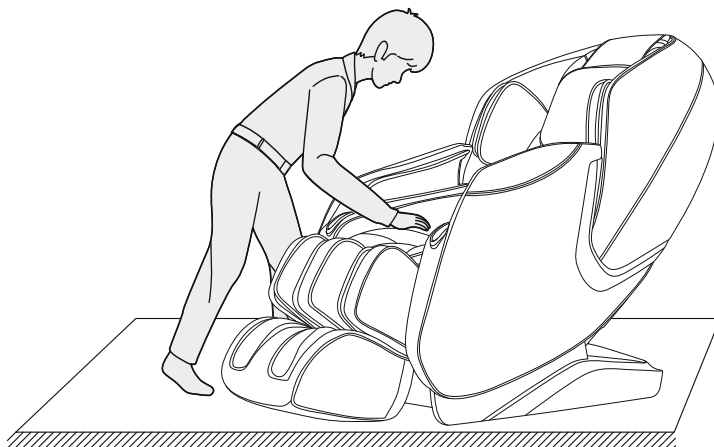
Przed korzystaniem z fotela masującego upewnij się, że ramię masujące pozostaje w górnej części oparcia tak, aby uniknąć dyskomfortu pośladków podczas nacisku na ciało i uszkodzenia samych ramion masujących.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa


! Uwaga

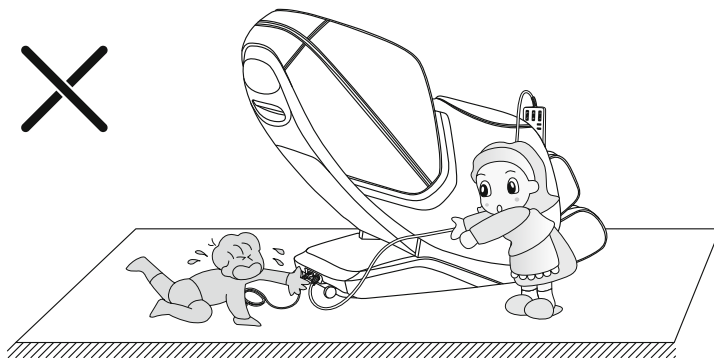Nie staraj się wyciągać kabla sterującego lub przewodu zasilającego w trybie gotowości lub włączania, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub porażenia prądem. Radzimy odłączyć kabel pilota i przewód zasilający oraz odłożyć go po użyciu fotela.




! Uwaga

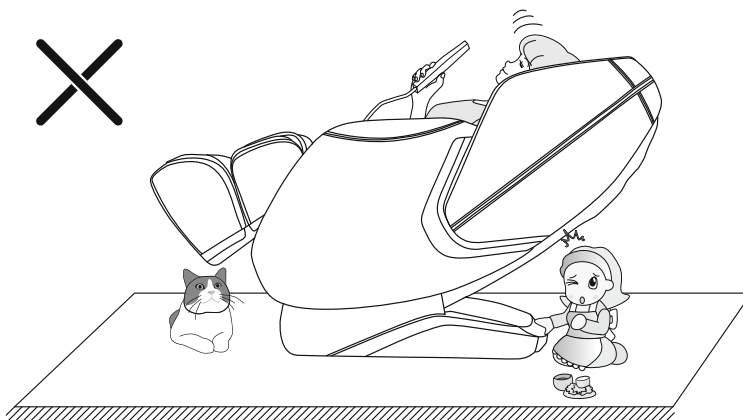
Przed uruchomieniem funkcji Zero Gravity należy sprawdzić, czy pod podnóżkiem i oparciem znajdują się dzieci lub zwierzęta domowe, może to spowodować uszkodzenie fotela masującego lub obrażenia ciała.



Schemat fotela masującego

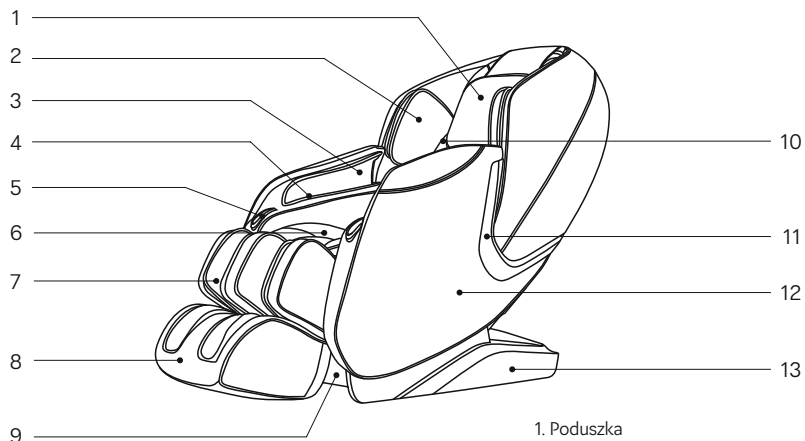

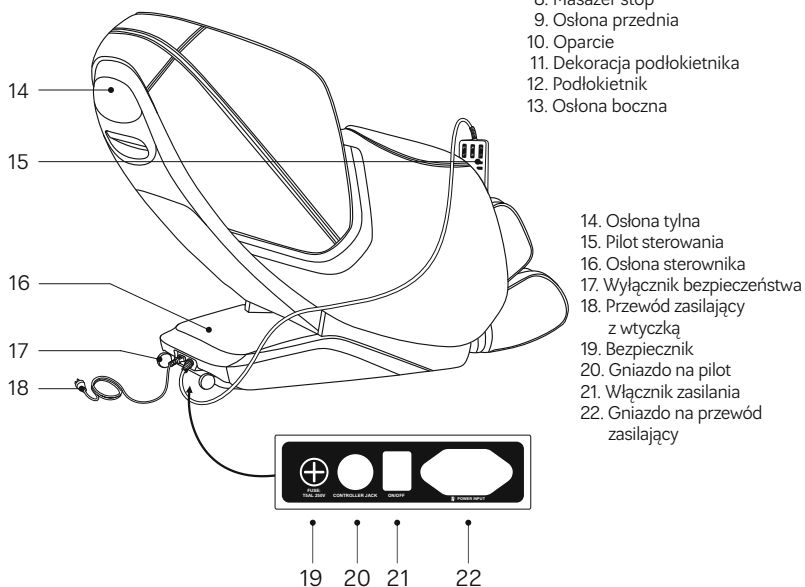1. Poduszka
2. Masażer ramion
3. Masażer przedramion
4. Łagodny masaż magnetoterapią
5. Pilot zdalny i uchwyt na telefon
6. Siedzisko
7. Masażer łydek
8. Masażer stóp
9. Osłona przednia
10. Oparcie
11. Dekoracja podłokietnika
12. Podłokietnik
13. Osłona boczna




14. Osłona tylna
15. Pilot sterowania
16. Osłona sterownika
17. Wyłącznik bezpieczeństwa
18. Przewód zasilający z wtyczką
19. Bezpiecznik
20. Gniazdo na pilot
21. Włącznik zasilania
22. Gniazdo na przewód zasilający

Funkcje i działanie

- Wyposażony w zestaw mechanicznych, inteligentnych ramion z zestawem 4 kul masujących.
- 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, oklepywanie z ugniataniem.
- 6 programów automatycznych: Comfort, Ease, Full Body, Neck & Shoulder, Back & Waist Massage, Stretch.
- Posiada funkcję manualnego masażu górnej części ciała (wybrany obszar, punktowo, całe plecy, ramiona przy szyi, talia pleców). Szybkość prowadzenia masażu można regulować w trzech poziomach. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu. Przy masażu ostukującym (tapping), shiatsu i oklepywaniu (knocking) szerokość między dwiema kulkami ugniatającymi jest regulowana w trzech poziomach: szerokim, średnim i wąskim.
- Funkcja masażu powietrznego z trzema trybami: na całym ciele, na ramionach, na nogach, z 3 regulowanymi intensywnościami.
- Funkcja masażu stóp rolkami masującymi.
- Podnóżek dostosowuje się do wzrostu użytkownika.
- Podnóżek i oparcie poruszają się synchronicznie. Istnieje możliwość ich automatycznej regulacji.
- Oparcie fotela do masażu powinno znajdować się w odległości co najmniej 275 mm od ściany.
- Funkcja ogrzewania IR - na podczerwień.
- W lewej i prawej poduszce powietrznej dłoni znajduje się dodatkowo masaż z funkcją magnetoterapii.
- Magnes wysokoenergetyczny znajduje się w okolicach obu pięt masażera stóp.
- Masażer pleców typu SL dopasowuje się do krzywej ludzkiego ciała, a oparcie podczas leżenia znajduje się w pozycji Zero Gravity.
- Po wyłączeniu fotel powraca do ustawień startowych. Ramiona masujące także powrócą do pozycji początkowej.

Sposób użytkowania

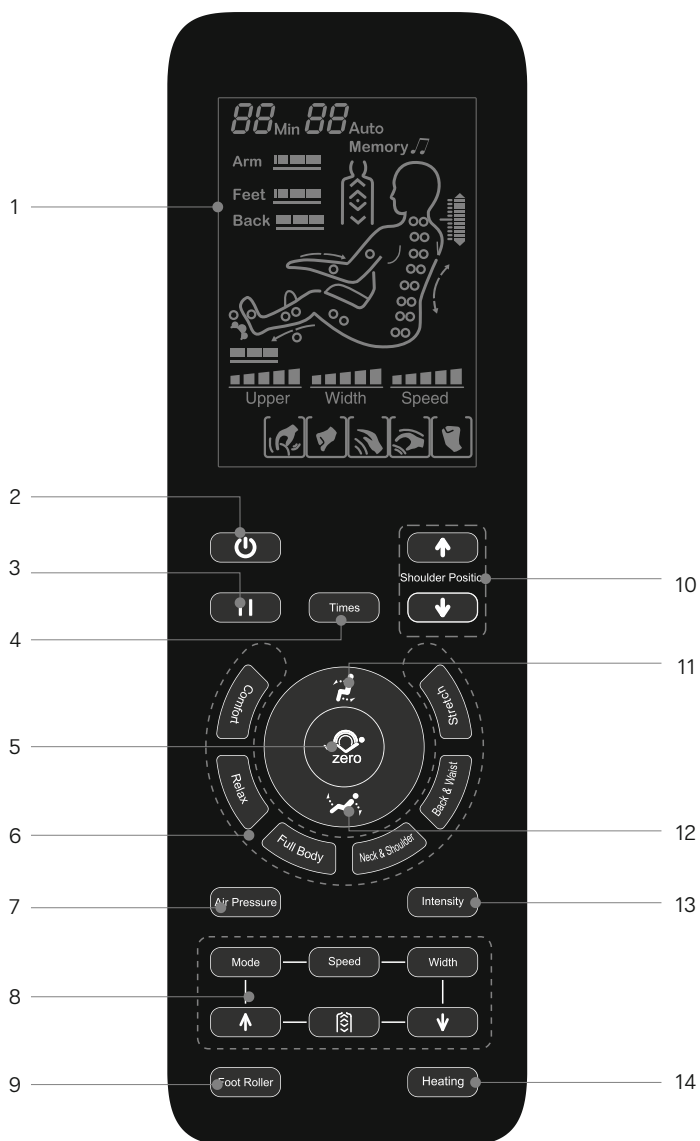Uwaga: Przedstawiony wyświetlacz odnosi się do tego konkretnego produktu.



Sposób użytkowania

1. Wyświetlacz:
 - Pokazuje wszystkie funkcje fotela.
2. Przycisk uruchamiania fotela
 - Włącza i wyłącza wszystkie funkcje fotela.
3. Przycisk pauzy:
 - Wstrzymanie wszystkich funkcji fotela.
4. Przycisk długości masażu.
 - Ustawienie czasu prowadzonego masażu
5. Przycisk automatycznego rozkładania fotela do pozycji leżącej
 - Wybierz jedną z trzech pozycji leżących jako swoją ulubioną.
6. Przycisk masażu automatycznego.
 - Więcej informacji na stronie 11 tej instrukcji.
7. Przycisk masażu powietrznego
 - Włączanie i wyłączanie funkcji masażu powietrznego (więcej informacji na stronie 12 tej instrukcji).
8. Przycisk masażu manualnego
 - Więcej informacji na stronie 11 tej instrukcji.
9. Przycisk masażu rolkowego stóp
 - Włączanie i wyłączanie funkcji masażu rolkowego stóp.
10. Przycisk regulacji wysokości ramion masujących
 - Możliwość korekty ustawienia ramion masujących.
11. Przycisk podnoszenia fotela masującego
 - Podniesienie oparcia do góry i obniżenie podnóżka.
12. Przycisk pochylania fotela masującego
 - Opuszczenie oparcia do dołu i podniesienie podnóżka.
13. Przycisk intensywności masażu powietrznego
 - Regulacja siły nacisku masażu powietrznego.
14. Ogrzewanie
 - Włączanie i wyłączanie funkcji ogrzewania.

Sposób użytkowania


1. Włącz fotel, przelączając włącznik w pozycję ON



2. Start masażu

1. Wciśnij przycisk włączania (Power).
2. Mechanizm przeprowadzi skanowanie linii kręgosłupa oraz wyszuka najwyższy punkt górnych partii ciała, do którego będzie odbywać się masaż.
3. Jeżeli mechanizm nie jest dopasowany do pozycji ramion, można go ustawić za pomocą przycisków podnoszących lub opuszczających mechanizm, istnieje 10 poziomów. Program automatyczny uruchamia się po 10 sekundach od ustawienia wysokości ramion.

Przycisk	Opis działania	Ekran
	Przesuń mechanizm do góry, aby osiągnąć poziom ramion	
	Przesuń mechanizm w dół, aby osiągnąć poziom ramion	

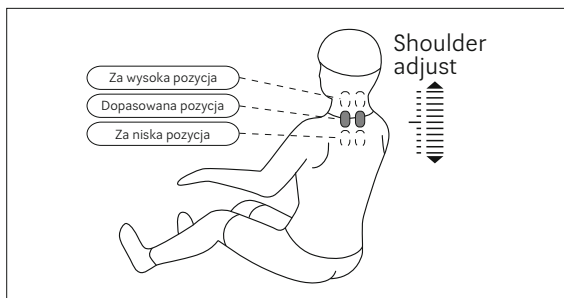

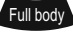

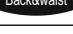



Podczas skanowania ciała ikona regulacji pozycji barku zostanie wyświetlona na ekranie pilota i usłyszysz dźwięk „DiDi”, następnie naciśnij klawisze pozycji barku w górę i w dół, aby ustawić pozycję barku. Możesz także nacisnąć dowolny z sześciu klawiszy funkcyjnych automatycznego masażu (comfort, ease, full body, neck shoulder, back waist, stretch) i rozpocząć masaż. Poniższy krok 4 możesz pominąć.







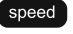


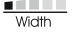

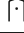
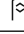





4. Wybierz odpowiednią funkcję i rozpocznij masaż.

Sposób użytkowania

· Opis automatycznych programów masażu









Funkcja	Przycisk	Opis działania	Ekran
Programy automatyczne		Spokojny masaż, rozluźniający mięśnie.	F1 Auto
		Głęboki masaż, relaks w obszarach bólu.	F2 Auto
		Kompleksowy masaż całego ciała.	F3 Auto
		Masaż na górne partie kręgosłupa.	F4 Auto
		Masaż na dolne partie kręgosłupa, uda i pośladki.	F5 Auto
		Podnózek i oparcie unoszą się w połączeniu z masażem powietrznym, aby rozciągnąć nogi, usunąć zmęczenie i zregenerować siły.	F6 Auto

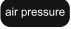· Techniki masażu górnych partii ciała



Funkcja	Przycisk	Regulacja pracy ramion masujących	Ekran
Techniki manualne		Shiatsu: Szybkość, szerokość	
		Ugniatanie: Szybkość	
		Oklepywanie: Szybkość, szerokość	
		Ugniatanie z oklepywaniem: Szybkość	
		Rozbijanie: Szybkość, szerokość	
Szybkość		3 poziomy dopasowania	 Speed
Szerokość		3 poziomy dopasowania	 Width
Masaż pleców		Stała pozycja masażu (fixed), punktowy	 H0
		Mały obszar masażu (partial), częściowy	 H1
		Całościowy masaż pleców (overall)	 H2
		Masaż górnych partii ciała	 H3
		Masaż dolnych partii ciała	 H4
		Ustawienie pozycji mechanizmu masującego (pomiędzy punktowym i częściowym masażem)	Przesuwa mechanizm w górę
			Przesuwa mechanizm w dół

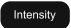Sposób użytkowania



· Masaż poduszkami powietrznymi

Funkcje	Przycisk	Opis działania	Ekran
Tryb masażu poduszkami powietrznymi		Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała: masaż poduszkami na ręce oraz nogi.	Arm  Feet 
		Ramiona: masaż poduszkami na ręce.	Arm 
		Nogi: masaż poduszkami na łydki i stopy.	Feet 
Intensywność		3 poziomy dostosowania.	Arm  Feet 

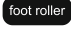

· Funkcja masażu rolkowego stóp

Funkcje	Przycisk	Opis działania	Ekran
Rollki na stopy		Włączenie i wyłączenie masażu rolkowego stóp.	

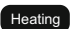


· Ogrzewanie

Funkcje	Przycisk	Opis działania	Ekran
Ogrzewanie		Ogrzewanie oparcia promieniami podczerwonymi, odczuwalne po trzech minutach.	

· Pauza/Start masażu

Funkcje	Przycisk	Opis działania	Ekran
Pauza / Start		Naciśnij ten przycisk podczas masażu, wszystkie czynności zostaną natychmiast zatrzymane (minutnik będzie dalej odliczał), a następnie naciśnij ten przycisk ponownie, aby masaż został wznowiony.	

· Funkcje ustawienia fotela

Funkcje	Przycisk	Opis działania
Pozycja siedząca		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie wracać do pozycji siedzącej do momentu, w którym puścisz przycisk. Jeżeli osiągniesz maksymalną pozycję, fotel wyda sygnał dźwiękowy.
Pozycja leżąca		Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie schodził do pozycji leżącej do momentu, w którym puścisz przycisk. Jeżeli osiągniesz maksymalną pozycję, fotel wyda sygnał dźwiękowy.
Zero Gravity		Włączając ten przycisk, fotel przechodzi do pozycji Zero Gravity. Jest to pozycja w pełni leżąca.

Sposób użytkowania

· Inne manualne funkcje

Funkcje	Przycisk	Opis działania	Ekran
Czas	Timing	Ustawienie długości masażu, jedno wciśnięcie wydłuża go o 5 min., max. do 30 min. Przekroczenie tego czasu cofa do 5 min.	20min

3. Wyłączenie zasilania i zatrzymanie masażu.

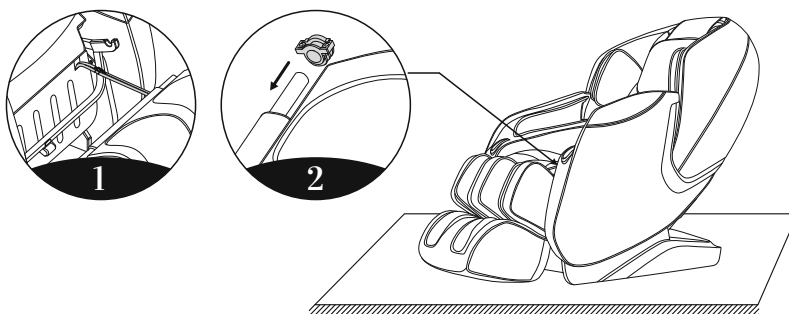
· Aby zakończyć masaż przed upływem czasu, na jaki został zaprogramowany, wciśnij czerwony przycisk. Masaż zostanie natychmiast zatrzymany, podnóżek i oparcie powróci do pozycji siedzącej.

Po upływie zaprogramowanego czasu masaż zostanie zatrzymany, a fotel masujący pozostanie w wybranej pozycji.




4. Instalacja podnóżka.

1. Podłącz kostkę elektryczną oraz przewody powietrzne z masażera stóp do głównej konstrukcji fotela masującego. (rys. 1)
2. Umieść uchwyt mocujący (tuleja mocująca) masażera stóp po dwóch stronach okrągłych rurek (rys. 2).




Sposób użytkowania

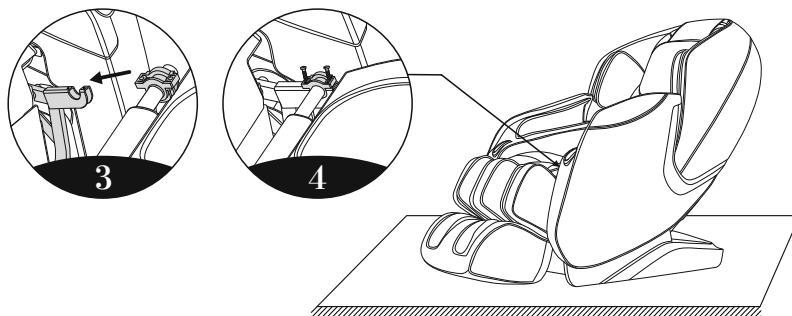- Umieść masażer stóp na uchwycie łączeniowym przy ramie fotela (rys. 3).
- Następnie 4 śrubami (po każdej stronie 2 szt.) przymocuj i skręć ze sobą oba elementy (rys. 4). Sprawdź, czy występują jakiegokolwiek nieprawidłowości niezgodne z instrukcją powyższej i zakończ montaż.



5. Montaż/demontaż poduszki pod głowę i górną partię pleców.

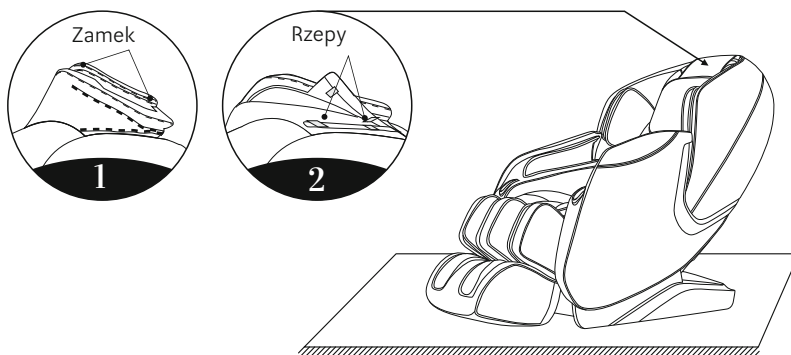
- Używanie poduszek może zredukować intensywność masażu ramion i szyi. Możesz zdecydować, którą z poduszek chcesz zdemontować (rekomendowane jest używanie poduszki osłaniającej głowę). Pokrycie oparcia demontowane jest za pomocą zamka błyskawicznego (Rysunek 1). Poduszka ochraniająca głowę demontowana jest za pomocą rzepu (Rysunek 2).



Sposób użytkowania

6. Ochrona podłoża

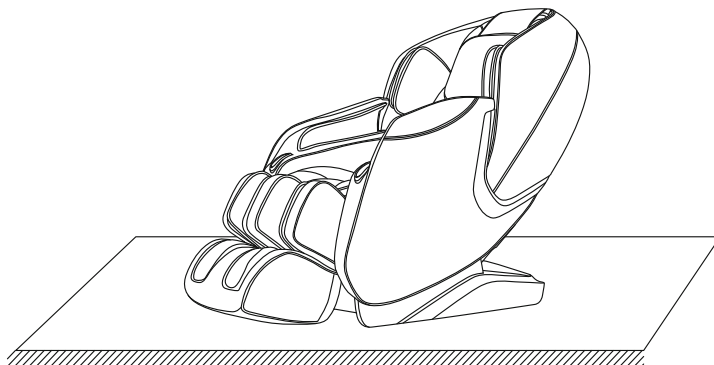
· Używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie dywaników bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.



Uwaga: Nie przesuwaj fotela na kółkach po drewnianej podłodze, nierównym podłożu lub w wąskiej przestrzeni. Do podniesienia fotela potrzebne są dwie osoby. Nie podnosz fotela bezpośrednio za podłokietniki, staraj się korzystać z elementów stelaża.

7. Sposoby przemieszczania

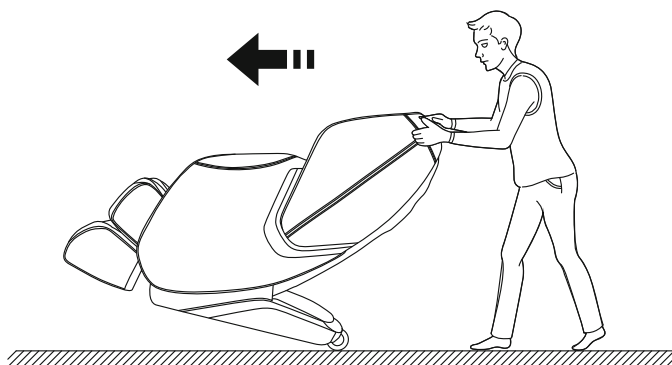Upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się nad ziemią, przechyl oparcie do pewnego stopnia do tyłu (ze środkiem ciężkości spoczywającym na kołach), popchnij fotel do przodu lub tyłu, a na końcu postaw fotel w normalnej pozycji w powolny i delikatny sposób.




Uwaga: Podczas przesuwania fotela należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający i przewód pilota.

Sposób użytkowania

8. Odległość od ściany

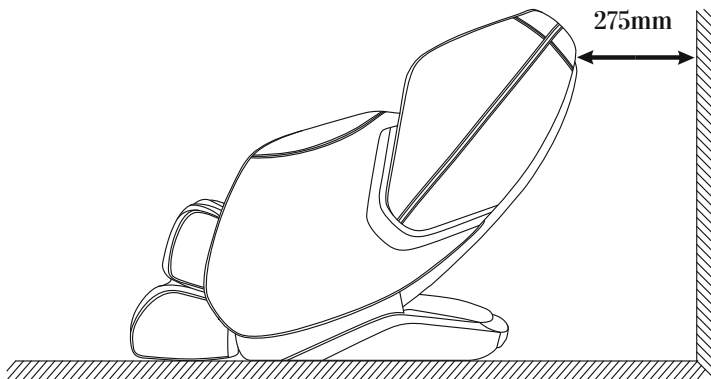· Po ustawieniu fotela do masażu oparcie zawsze powinno znajdować się w odległości co najmniej 275 mm od ściany. Jeśli oparcie jest zbyt blisko ściany, zderzy się z nią i spowoduje uszkodzenie produktu podczas podnoszenia.



Specyfikacja fotela masującego

Model: Massaggio Eccellente Pro

Wersja: 2

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie: 220-240V~ 50Hz/60Hz



Pobór mocy: 110W

Rekomendowany czas pracy: 20Min

Klasa bezpieczeństwa: Klasa I

Zastosowane materiały: PVC, PA, części stalowe, elektryczne i elektroniczne

MATERIAŁ	PU	SKÓRA	TRANINA	DREWNO

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska.
Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację.
Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska.
Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.



ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ