



D8

Soniczna elektryczna szczoteczka do zębów


Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Fairywill 508. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. Opis produktu

- Wibracje soniczne: ponad 40.000 uderzeń na minutę.
- 5 trybów: White, Clean, Sensitive, Polish i Massage.
- Ergonomiczna konstrukcja włosia umożliwi dokładne czyszczenie zębów oraz jamy ustnej.
- 2 minutowy timer przypomina o zmianie ruchów czyszczenia co 30 sekund.
- W zestawie znajduje się wymienna główka szczoteczki do zębów.
- Stopień wodoodporności IPX7.
- Ładowanie produktu powinno odbywać się za pomocą przewodu typu USB.
- Pełne naładowanie akumulatora przekłada się na około 30 dni użytkowania.

2. Budowa produktu

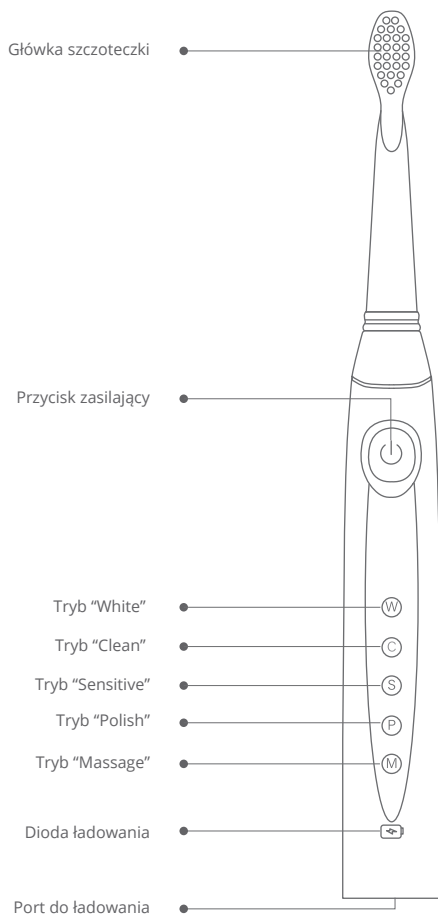

Ilustr. 1

3. Obsługa produktu

★ Pierwsze użytkowanie


- Zamontuj głowicę szczoteczki i upewnij się, że jest prawidłowo zablokowana.
- Wybierz swój preferowany tryb, naciskając przycisk zasilający. Możesz przełączać się pomiędzy 5 trybami "White, Clean, Sensitive, Polish i Massage" poprzez ciągłe naciskanie.
- Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Umieść włosie z pastą przy zębach pod lekkim kątem w kierunku linii dziąseł.
- Naciśnij przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie.
- Delikatnie przesuń głowicę szczoteczki po zębach z przodu, z tyłu i po dziąsłach. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na zęby ani nie przykładaj włosów do jednego obszaru przez dłuższy czas.
- Mycie zębów powinno trwać 2 minuty. Po 30 sekundach szczoteczka przerwie działanie, aby przypomnieć o zmianie czyszczonej strefy.
- Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.
- Aby uniknąć plam z pasty do zębów, włączaj szczoteczkę dopiero po przyłożeniu jej do zębów i wyjmuj ją z ust dopiero po wyłączeniu.

★ Wymiana głowki szczoteczki do zębów

- Montaż: Przesuń głowicę szczoteczki w dół do uchwytu. Przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem T.
- Demontaż: Przekręć głowicę szczoteczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem B. Wyciągnij ją wzdłuż uchwytu.


Montaż

Przesuń głowicę szczoteczki do zębów w dół zgodnie z kierunkiem A oraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

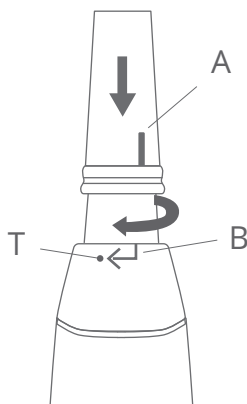

Demontaż

Odkręć głowicę szczoteczki do zębów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem B. Następnie wyciągnij głowicę przesuwaną ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

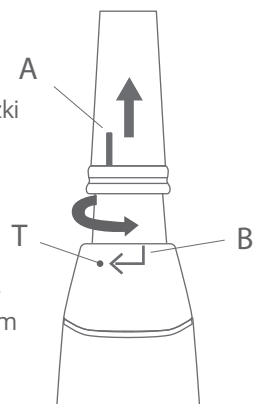

★ Ładowanie szczoteczki

- Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda ładowania mignie 10 razy, aby przypomnieć o ładowaniu.
- Podłącz szczoteczkę do zębów za pomocą kabla USB do dowolnego źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie.
- Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda i ładowarka wyłączą się automatycznie, aby uniknąć przeładowania.
- W przypadku pierwszego użycia lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, możliwe jest, że wskaźnik nie świeci się przez pierwsze 5 minut.

4. Specyfikacja

Źródło zasilania szczoteczki do zębów: DC3.7V

Materiał: ABS/TPE

Włosie: Nylon

Pobór mocy szczoteczki do zębów: 1.0W

Temperatura robocza: 0-50 °C

5. Środki ostrożności

- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować produktu bez autoryzacji.
- Osoby z ciężkimi chorobami przyzębia lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej powinny skonsultować się z lekarzem przed użytkowaniem produktu.
- Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi powinny być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.
- Nie należy pozostawiać produktu w wodzie przez dłuższy czas.
- Nie należy umieszczać szczoteczki w miejscach o wysokiej temperaturze lub wystawiać jej na działanie promieni słonecznych.
- Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.