

**Instrukcja obsługi****OSTRZEŻENIE**

- Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia i zachowaj na wypadek potrzeby w przyszłości.
- Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku 8 lat i starsze osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone o używaniu urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci nie mogą się z urządzeniem bawić. Czyszczenia i utrzymania nie mogą przeprowadzać dzieci bez nadzoru.

- Tego urządzenia można używać tylko z dostarczonym adapterem sieciowym SK01T-0500100Z. Zdejmowany zasilacz IEC 60417-6181.
- Jeżeli kabel zasilający lub adapter AC/DC jest uszkodzony, musi je wymienić producent lub jego przedstawiciel serwisowy, lub podobnie wykwalifikowana osoba, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta i uzgodnić wymianę.
- Nie zanurzać urządzenia do wody. NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników ani ściernych środków czyszczących.
- NIE UŻYWAĆ tego urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo, spadło lub zostało uszkodzone.
- NIE UŻYWAĆ faceLITE w razie zażywania leków, które mogą wywoływać światłoczułość. Używanie faceLITE i zażywanie leków, które wywołują światłoczułość, może spowodować poważną reakcję skórą.

Fotoczułość jest częstym skutkiem ubocznym zażywania różnych leków. Mogą ją wywoływać niektóre antybiotyki, chemioterapeutyki i diuretyki. W razie wątpliwości co do niektórych zażywanych leków należy zasięgnąć porady swojego lekarza.

- NIE UŻYWAĆ faceLITE do leczenia innych stanów oprócz tych, które są podane we wskazaniach dotyczących użycia.
- FaceLITE nie powinny używać kobiety w ciąży, planujące ciążę lub karmiące piersią. Maska faceLITE NIE BYŁA testowana na kobietach w ciąży lub karmiących piersią, dlatego ryzyko dla płodu, noworodków lub kobiet w ciąży nie jest znane.
- NIE UŻYWAĆ systemu faceLite LED cierpiąc na łupus erythematoses, fotoczułą egzemę lub albinizm. Używanie systemu faceLite LED do leczenia łupus erythematoses, fotoczułej egzemy lub albinizmu może wywołać poważną reakcję skórą.
- NIE UŻYWAĆ faceLITE w razie jakichkolwiek fotoczułych zaburzeń (uczulenia na światło).
- Przed użyciem faceLITE należy przeprowadzić test działania uczulającego.
- NIE UŻYWAĆ faceLITE w żaden sposób, który nie jest dokładnie taki, jak jest podane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Natychmiast WYŁĄCZYĆ i usunąć FACELITE, jeżeli jest gorąca lub skóra jest nieprzyjemnie ciepła.
- Używać faceLITE tylko z własnymi poduszczkami hydrożelowymi zalecanymi lub dostarczonymi do użycia z faceLITE. Inne maski są do dyspozycji, ale nie były testowane z systemem faceLITE.

- NIE UŻYWAĆ faceLITE bez uprzedniego usunięcia kremów, płynów kosmetycznych lub makijażu.

Niektóre składniki w tych produktach mogą powodować nadwrażliwość na światło lub mogą obniżyć efekt zabiegu.

- NIGDY nie używać faceLITE w pobliżu wody lub tam, gdzie na wyrób mogłaby się wylać woda.

NIE UŻYWAĆ faceLITE, jeżeli istnieje podejrzenie, że był w kontakcie z wodą.

- Utrzymywać faceLITE z dala od GORĄCYCH powierzchni.
- NIE PRÓBOWAĆ w żaden sposób przerabiać faceLITE. Przeróbka faceLITE powoduje zanik gwarancji. FaceLITE nie zawiera żadnych części, które można naprawić.
- NIE UŻYWAĆ faceLITE, jeżeli maska, pilot lub kabel zasilający są jakkolwiek uszkodzone.
- Pasek faceLITE zawiera mieszankę poliestru, nylonu i lycry. W razie uczulenia na któryś z tych materiałów jest możliwe, że nie będzie możliwe użycie dostarczonego poprzęgu przez głowę.
- NIE UŻYWAĆ maski faceLITE LED w razie bólów głowy spowodowanych światłem.
- Nie podłączać przedniej wtyczki do gniazdka bez podłączonego adaptera.

WSTĘP

W wyniku ubytku kolagenu i elastycznych tkanek w miarę starzenia skóra staje się cieńsza i bardziej sucha, powstają zapadliny i zmarszczki. Starzejąca się cera jest też dużo bardziej skłonna do powstawania brązowych plam i pigmentacji. Ponadto dermis skóry może w procesie starzenia stracić od 20 do 80 % swojej grubości.

faceLITE wykorzystuje dwie sprawdzone długości światła; 633nm (czerwone światło) i 830nm (światło bliskie podczerwieni). Badania kliniczne wykazały, że te długości światła stymulują komórki produkujące kolagen i elastynę za pośrednictwem procesu zwanego fotobiomodulacją.

faceLITE została skonstruowana tak, aby dostarczała światło bezpośrednio do skóry i zapewniła, aby maksymalna ilość światła dotarła do jego komórkowych celów i bez strat.

OPIS



- 1 Maska na twarz
- 2 Pilot
- 3 Włączone/Wyłączone
- 4 Kontrolki LED
- 5 Gniazdko USB-C
- 6 Złącze USB
- 7 Adapter i cztery złącza, Wielka Brytania, UE, Chiny i USA
- 8 Pasek na głowę
- 9 Torba podróżna
- 10 Wkładki ochronne na oczy

TEST WRAŻLIWOŚCI

Przed przeprowadzeniem pierwszego zabiegu jest ważne przeprowadzenie testu wrażliwości (patch test).

1. Umieścić faceLITE na wewnętrznej stronie ramienia.
2. W razie odczucia, że skóra jest gorąca lub zabieg jest nieprzyjemny, natychmiast PRZESTAĆ używać urządzenia.
3. Po zabiegu odczekać co najmniej 6 godzin. Jeżeli skóra na wewnętrznej stronie ramienia jest czerwona i/lub swędzi, nie jest wskazane używanie faceLITE.

WKŁADKI OCHRONNE NA OCZY

Światło wykorzystywane przez maskę faceLITE jest całkowicie bezpieczne, ale może się wydawać stosunkowo jasne. W razie odczucia potrzeby obniżenia jasności światła LED można użyć opcjonalnych wkładek ochronnych na oczy dla poprawy komfortu. Wkładki ochronne na oczy łatwo zakłada się do oczodołów.



ŁADOWANIE


W celu naładowania faceLITE należy podłączyć adapter zasilający do gniazdka USB-C pilota. Podłączyć adapter AC/DC do sieci i włączyć go. 3 LED na jednostce sterującej zaczną migać sygnalizując ładowanie. Po całkowitym naładowaniu zaczną świecić wszystkie trzy LED.

Uwaga: Zawsze doładować całkowicie urządzenie, jeżeli ostatnia LED przestanie migać.

faceLITE nie będzie działać podczas ładowania.

ZACZYNAMY

Przed każdym użyciem, z wyłączonym urządzeniem, oczyścić maskę faceLITE. Patrz zalecenia dotyczące czyszczenia. Maska faceLITE jest dostarczana z nastawnym popręgiem, który umożliwia wygodne noszenie maski.

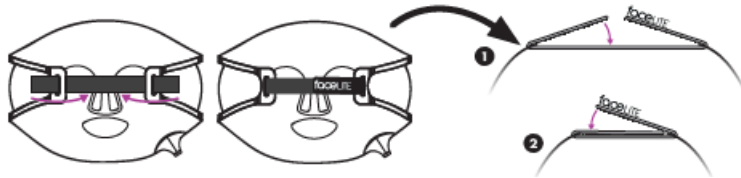

PIELĘGNACJA

Najlepszy efekt uzyskuje się używając 3-5 dni w tygodniu przez okres minimalnie 4 tygodni. Zabiegi zachowawcze powinny być przeprowadzane według potrzeby, w zależności od stylu życia i stanu skóry.

Zabieg faceLITE:

1. Oczyszczyć skórę, aby usunąć wszelkie ślady pielęgnacji cery.
2. W celu założenia maski przeciągnąć pasek otworami na obu stronach maski i połączyć końce z pomocą haczyków i pętli (patrz rysunek powyżej).
3. Światło wykorzystywane przez maskę faceLITE jest całkowicie bezpieczne, ale może się wydawać zbyt jasne. W razie odczucia potrzeby obniżenia jaskrawości światła LED można użyć opcjonalnych wkładek ochronnych na oczy dla poprawy komfortu. Wkładki ochronne na oczy łatwo zakłada się do oczodołów.
4. Umieścić urządzenie faceLITE na głowę i twarz, w razie potrzeby dopasować popręg.
5. Naciskając przycisk On / Off włączyć urządzenie. Urządzenie po dziesięciu minutach automatycznie wyłączy się. Zabieg można kiedykolwiek ukończyć naciskając przycisk On / Off.
6. Po ukończeniu zabiegu zdjąć maskę.
7. Nanieść swój normalny krem nawilżający i/lub krem do opalania.

Uwaga: Bezpośrednio po zabiegu skóra może zaczerwienić się. Powinna wrócić do normy w ciągu 1-2 godzin.

Pielęgnacja maską hydrożelową (opcjonalnie):

faceLITE można kombinować z maską hydrożelową dla uzyskania lepszych wyników. Prosimy o przeczytanie wszystkich zaleceń dostarczonych z maską.

Maskę hydrożelową aplikuje się po oczyszczeniu cery i przed naniesieniem faceLITE na twarz. Wyjąć maskę hydrożelową z opakowania i nanieść wprost na skórę. Wygładzić wszystkie zmarszczki lub fałdy w masce.

Użyć do całego 10-minutowego zabiegu świetlnego. Maskę hydrożelową może zostawić do 30 minut.

CZYSZCZENIE

Przed każdym użyciem, z wyłączonym urządzeniem, oczyścić maskę do twarzy według poniższych zaleceń.

1. Upewnić się, że urządzenie podczas czyszczenia NIE JEST ładowane.
2. Oczyszczyć maskę do twarzy ściereczką na wodnej bazie lub wilgotną czystą szmatką. Odporne plamy można usunąć delikatnie przecierając 70% alkoholem. NIE UŻYWAĆ żadnych innych środków czyszczących, które mogą uszkodzić plastik.
3. Oczyszczyć regulator wilgotną czystą szmatką.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać faceLITE w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Użyć załączonej torby. Nie przechowywać faceLITE w zapyłonym otoczeniu, na bezpośrednim słońcu, lub w wilgotnych i mokrych warunkach.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie świeci czerwone lub podczerwone światło z faceLITE	Urządzenie nie jest naładowane lub nie ładowane.	Podłączyć pilota do adaptera do ładowania i upewnić się, że są podłączone złącza, ładować, dopóki trzy kontrolki LED na pilocie nie będą świecić i NIE BĘDĄ migać.
Nie świeci czerwone lub podczerwone światło z faceLITE	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Podłączyć złącze USB-C do sieci elektrycznej.
LED NIE zgasną po 10 minutach.	Urządzenie jest uszkodzone.	Zwrócić je dostawcy

LIKWIDACJA



Dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012 / 19 / EU) wprowadzono dla zapewnienia recyklingu wyrobów z użyciem najlepszych dostępnych technologii utylizacji i recyklingu w celu minimalizacji wpływu na środowisko, eliminacji jakichkolwiek niebezpiecznych substancji, oraz zapobieżenia wzrostowi liczby wysypisk. Ten wyrób jest klasyfikowany jako urządzenie elektryczne lub elektroniczne, dlatego należy zapewnić, aby po upływie żywotności produktu został on zlikwidowany w prawidłowy sposób zgodnie z wymaganiami lokalnych władz. NIE WOLNO likwidować z odpadem komunalnym.

DANE KONTAKTOWE OŚRODKA SERWISOWEGO:

Wyłączny importer i dystrybutor na CZ i SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamacje / serwis

Zápy 4 (teren RTK)

250 01 Zápy, Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz