

# BERDSEN



BW-141 | BW-144 | BW-145


## Waga dla niemowląt

przeznaczona jest do kontroli wagi dziecka (max. 20kg)

### PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed montażem i użyciem zapoznaj się z instrukcją i zastosuj się do jej zasad. Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.

### BUDOWA URZĄDZENIA

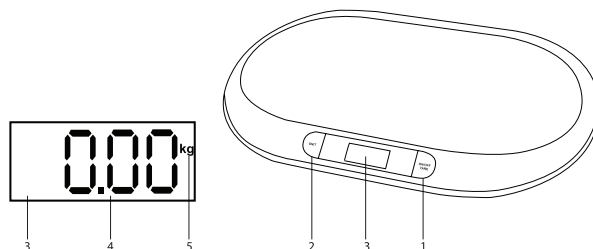

1. Przycisk ON/OFF – przytrzymać przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.  
Przycisk TARE - najpierw dokonywany jest pomiar wagi dodatkowego obciążenia, a następnie wyświetlacz jest zerowany.
2. Przycisk UNIT - zmiana jednostki pomiaru wagi: kg/lb/st.
3. Wyświetlacz cyfrowy.
4. Wskaźnik wagi – pokazuje pomiar wagę dziecka.
5. Wskaźnik KG/LB/ST – wskazuje ustawioną jednostkę wagi.

### OBSŁUGA URZĄDZENIA

- 1 Używać na twardej i płaskiej powierzchni.
- 2 Przytrzymać przycisk on/off w celu włączenia urządzenia.
- 3 Delikatnie umieścić niemowlę lub małe dziecko na wadze w celu wykonania pomiaru.
- 4 Ponownie przytrzymać przycisk on/off w celu wyłączenia urządzenia.
- 5 Uwaga: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 25 sekundach.


## OSTRZEŻENIA!

- Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu.
- Należy stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
- Niewłaściwe używanie wagi może być niebezpieczne i unieważnia warunki gwarancji.
- Maksymalne obciążenie wagi wynosi: 20 kg. Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- Urządzenie należy zawsze używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy wyłącznie, jeżeli są one pod odpowiednią opieką lub zostały pouczone w zakresie bezpiecznej obsługi produktu i rozumieją związane z nim niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieci bez opieki nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.
- Nie należy narażać wagi na uderzenie i wstrząsy.
- Nie zanurzać wagi w wodzie i innych płynach.
- Nie umieszczać na wadze żadnych przedmiotów podczas jej przechowywania.
- Nie używać i nie przechowywać wagi w wilgotnym środowisku.
- Wagę należy umieszczać na płaskiej, suchej, stabilnej i twardej powierzchni. Nie stawiać na dywanie i elastycznych powierzchniach.
- Waga jest przeznaczona tylko do użytku domowego i nie do celów profesjonalnych.
- Waga nie jest zabawką. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie zmieniać położenia wagi podczas używania.
- Zabrania się używania produktu, gdy górna platforma została nadtamana lub pękła. Nie używać uszkodzonego produktu.
- Nie przechowywać wagi odwróconej do góry nogami.
- Aby zważyć dziecko, umieść je na wadze wyłącznie w pozycji leżącej.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka leżącego na wadze bez opieki.
- Jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niej baterie.
- Zasilanie produktu: zgodne ze specyfikacją
- W wyjątkowych sytuacjach baterie mogą być niebezpieczne! Ryzyko wycieku, pożaru oraz zapalenia! Należy zachować ostrożność.
- Montaż baterii może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.
- Nie należy łączyć nowych i zużytych baterii, baterii różnego typu, baterii z akumulatorami.
- Baterie należy włożyć zgodnie z odpowiednią polaryzacją baterii +/-.
- Jeśli używasz akumulatorów, należy wyjąć je z produktu przed rozpoczęciem ładowania.
- Nie ładować baterii jednorazowych.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
- Należy wyjąć wyczerpane baterie z produktu.
- Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci.
- Bateria, z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana, ani ładowana.
- Natychmiast usunąć wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia.
- Nie zwierać styków przedziałów ani zacisków baterii.
- Zużyte baterie należy zutylizować, wrzucając je do odpowiednio oznaczonych pojemników na zużyte baterie i akumulatory. Pojemniki te znaleźć można m.in. w sklepach z elektroniką.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie, w przypadku uszkodzenia wymienić na nowy.
- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Czyścić wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki. Nie czyścić wnętrza urządzenia.

## SPECYFIKACJA

1. Maks. obciążenie: 20kg/44lb
2. Min. obciążenie: 60g
3. Podziałka wagi: 10g/0.02lb
4. Jednostki wagi: kg, lb, lb:oz
5. Przeciężenie: "0-Ld"
6. Niski poziom naładowania baterii: 
7. Zasilanie: baterie 2 x baterie AAA 1,5 V

## WYMIANA BATERII

1. Otworzyć pokrywę baterii.
2. Umieść baterie w urządzeniu.
3. Zamknąć pokrywę baterii.

## UTYLIZACJA

### DBAJ O ŚRODOWISKO! NIE WYRZUCAJ TEGO PRODUKTU RAZEM Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kotowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużyte urządzenie nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub śmieciem, w którym zakupiono produkt.

**BERDSEN**

Wyprodukowano w Chinach dla:  
Manufactured in China for:  
Hergestellt in China für:

**Global Income s.c.**  
ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland  
NIP: 586-216-73-15 / tel. +48 (58) 746-37-97

