


UŻYWANIE KOŃCÓWEK

Końcówka Pik Pocket®

Końcówka Pik Pocket® została zaprojektowana specjalnie do podawania wody lub roztworów antybakteryjnych do kieszonek zębowych.

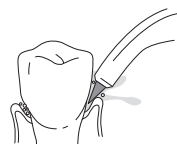


Używając końcówki Pik Pocket® irygator może być ustawiony tylko na najniższe ciśnienie. Umieścić miękką końcówkę przy zębach pod kątem 45 stopni w kierunku linii dziąseł i delikatnie poruszyć końcówkę aż będzie znajdować się tuż pod dziąslami w kieszonce. Włączyć urządzenie i kontynuować przemieszczanie wzdłuż linii dziąseł.




Końcówka do czyszczenia języka

Aby użyć końcówkę do czyszczenia języka należy ustawić najniższe ciśnienie, umieścić ją na środku języka mniej więcej w jego połowie i uruchomić irygator Water Flosser. Przesunąć w przód pod lekkim naciskiem. Zwiększyć ciśnienie zgodnie z preferencjami.

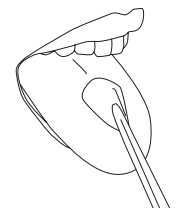

Końcówka do aparatów ortodontycznych

Aby użyć końcówkę ortodontyczną należy ostrożnie przesunąć ją wzdłuż linii dziąseł zatrzymując się na chwilę, aby delikatnie szczotkować obszar pomiędzy zębami oraz w okolicy aparatu a następnie przejść do następnego zęba.

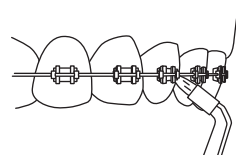

Końcówka Toothbrush (szczotkująca)

Umieścić końcówkę do szczotkowania zębów w ustach kierując głowicę szczotkującą na linię dziąseł zębów. Końcówka do szczotkowania zębów może być używana z lub bez pasty do zębów. Włączyć irygator Water Flosser, aby woda mogła przepływać przez końcówkę. Masując zęby pod lekkim naciskiem (włosie nie powinno się zginać) należy przesunąć końcówkę w tył i w przód krótkimi ruchami - bardzo podobnie jak w przypadku ręcznej szczoteczki do zębów.




Końcówka Plaque Seeker®

Aby użyć końcówki Plaque Seeker® umieścić końcówkę blisko zębów tak, aby włosie delikatnie dotykało zęby. Delikatnie przesunąć końcówkę wzdłuż linii dziąseł zatrzymując się pomiędzy zębami, aby delikatnie szczotkować i umożliwić wodzie przepłynięcie pomiędzy zębami.




Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów

Urządzenie Waterpik® Water Flosser może być używane do podawania roztworów do płukania jamy ustnej i antybakteryjnych. Po użyciu specjalnego roztworu należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatkanie częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchomienie go z końcówką skierowaną do zlewu aż zbiornik zostanie opróżniony.

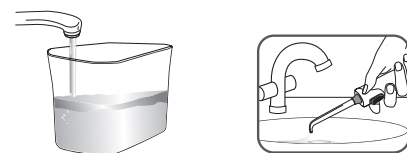

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Wyczyścić produkt, gdy zajdzie taka konieczność za pomocą miękkiej szmatki i delikatnego nieściernego środka czyszczącego. Dla ułatwienia czyszczenia zbiornik wody może zostać zdemontowany a górną część może być myta w zmywarce.

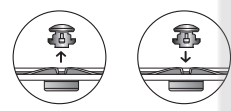

Usuwanie Wkładanie


UWAGA: Usunąć zawór zbiornika przed umieszczeniem go w zmywarce.

Usuwanie osadów twardej wody

Dodać 2 łyżki stołowe białego octu na pełny zbiornik ciepłej wody. Ustawić pokrętko w położenie „HIGH”(górne), skierować uchwyt i końcówkę do zlewu. WŁĄCZYĆ urządzenie (I) i pozwolić pracować do opróżnienia zbiornika. Przemycać powtórnie napełniając zbiornik do pełna czystą i ciepłą wodą.

Wyciek

Końcówki zamienne/nasadki mogą być zakupione od lokalnego dystrybutora, (Patrz str 8). W przypadku wycieku ze zbiornika należy upewnić się, że zawór jest we właściwym położeniu lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu pozyskania zaworu zamiennego.

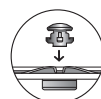

Konserwacja serwisowa

Irygatory Water Flosser Waterpik® nie posiadają części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika i nie wymagają okresowej konserwacji. W przypadku wszelkich potrzeb serwisowych należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, (Patrz str. 8) **Proszę nie wysłać produktu do biur firmy Waterpik International, Inc. gdyż opóźni to wykonanie usługi.**

SERWIS i GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARD BIS Sp. z o.o.** ul.Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 89/5338777, tel. 89/5334850 w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie: rejestracja.polkardbis.pl, zostanie objęte 2 letnią gwarancją.

Producent:



1730 East prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
USA

Dystrybucja w Polsce:



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.
ul.Marka Kotańskiego 2,
10-166 Olsztyn
tel/fax. 89/5338777
www.polkardbis.pl
e-mail: biuro@polkardbis.pl

Data zakupu:


Nr Seryjny:

Pieczęć i podpis sprzedawcy



**Waterpik®
Water Flosser**

**Irygator
Waterpik
Model WP-250
260
300**

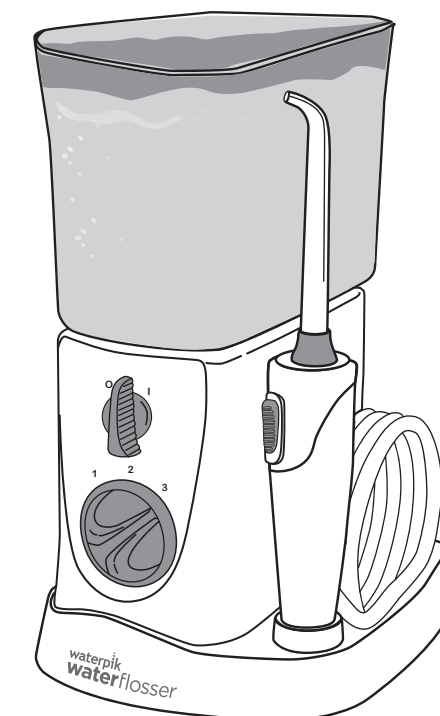

.....
www.waterpik.com

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI str 2

OPIS PRODUKTU str 3

PRZYGOTOWANIE
- ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA str 4 - 5

UŻYWANIE KOŃCÓWEK str 6

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW str 7

SERWIS I GWARANCJA str 8

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Używając produktów elektrycznych, w szczególności w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności łącznie z:
PRZECZYTAŃM WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym:

- Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia po zakończeniu użytkowania.
- Nie obsługiwać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczać ani nie wkładać do wody lub innych cieczy.
- Nie używać podczas kąpieli.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, gdzie może spaść lub zostać wciągniętym do wanny lub zlewu.
- Nie sięgać po urządzenie, które spadło do wody.

Natychmia stowo odłączyć wtyczkę.

- Sprawdzić czy przewód zasilania nie jest uszkodzony przed pierwszym użyciem i podczas eksploatacji urządzenia.


OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć zagrożenie oparzeniami, porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub urazem osób:

- Nie podpinąć opisywanego urządzenia do systemu o napięciu innym niż określone na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony lub wpadł do wody. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem patrz. str. 6.
- Nie kierować wody pod język, do uszu, nosa lub innych delikatnych stref. Urządzenie może wytworzyć ciśnienia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia tych stref.

- Używać urządzenia wyłącznie w sposób podany w niniejszych instrukcjach lub jak zaleca stomatolog.
- Używać wyłącznie końcówek lub akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.
- Nie upuszczać ani nie umieszczać żadnych obcych obiektów w otworze lub węży.
- Trzymać przewód elektryczny z daleka od ogrzewanych powierzchni.
- Nie używać na zewnątrz pomieszczeń ani w miejscach gdzie używane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie używać jodu, wybielacza lub stężonych olejków eterycznych nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie wspomnianych produktów może zakłócić działanie produktu i skrócić jego działanie.
- Przed użyciem produktu zdejść biżuterię znajdującą się w jamie ustnej.
- Nie używać, jeśli użytkownik ma otwarte rany na języku lub w ustach.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił przyjmowanie antybiotyków przed zabiegami dentystycznymi to należy zasięgnąć porady dentysty przed użyciem opisywanego urządzenia lub każdego innego środka higieny ustnej.
- Jeśli końcówka Pik Pocket® (niedołączona we wszystkich modelach) oddzieli się sama od trzonka z jakiegokolwiek powodu to należy wyrzucić ją wraz z trzonkiem i zastąpić nową końcówką Pik Pocket®.
- Nie używać urządzenia dłużej niż przez 5 minut w ciągu 2 godzin.
- W przypadku stosowania przez dzieci w wieku 8 lat i starsze bądź też osoby o specjalnych wymaganiach należy je dokładnie poinstruować i nadzorować.
- Dzieci muszą być nadzorowane dla zapewnienia, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik mógłby sam serwisować i nie wymagają one konserwacji.
- Napełniać zbiornik wyłącznie ciepłą wodą lub roztworem zalecanym przez stomatologów.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.

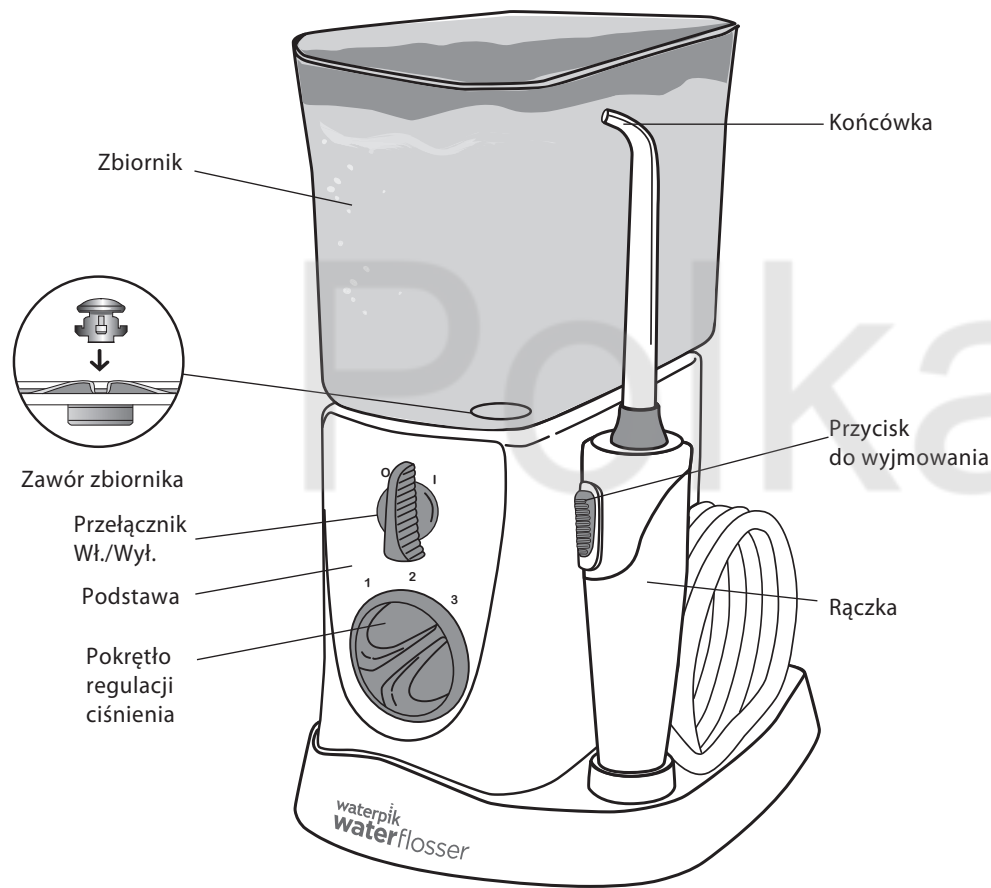

Wymieniaj co 3 miesiące

Końcówka ortodontyczna	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Aparaty korekcyjne <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznac.

Końcówka Pik Pocket®	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Kieszonki przyzębne <input checked="" type="checkbox"/> Rozwidlenia

Końcówka Plaque Seeker®	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Implanty <input checked="" type="checkbox"/> Korony <input checked="" type="checkbox"/> Mosty <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznac.

Końcówka – szczoteczka	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia

Wymieniaj co 6 miesięcy

Końcówk klasyczna	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia

Końcówka do czyszczenia języka	NAJLEPSZA DO
	<input checked="" type="checkbox"/> Bardziej świeżego oddechu


UWAGA: Nie wszystkie końcówki są dołączone do wszystkich modeli. Końcówki zamienne/nasadki mogą być zakupione od lokalnego dystrybutora.

Włączanie irygatora

Podłączyć kabel do gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko posiada przełącznik ścienny to należy upewnić się, że jest włączony.


Przygotowanie zbiornika

Zdjąć zbiornik i napełnić letnią wodą. Umieścić zbiornik na podstawie i mocno przycisnąć.

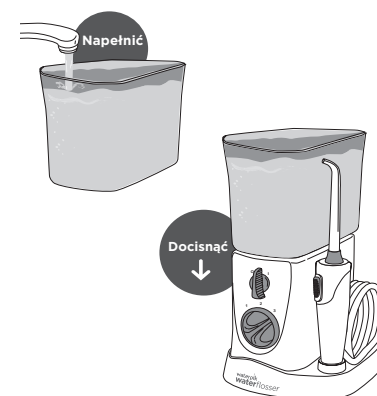


Instalacja i demontaż końcówek

Umieścić końcówkę w środku uchwytu irygatora Water Flosser. Kolorowy pierścień będzie ściśle przylegać do górnej części uchwytu, jeśli końcówka jest prawidłowo zainstalowana.

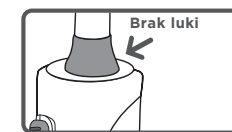

Aby zdjąć końcówkę z uchwytu należy przesunąć przycisk odblokowania końcówki ku górze uchwytu i podnieść końcówkę z uchwytu.

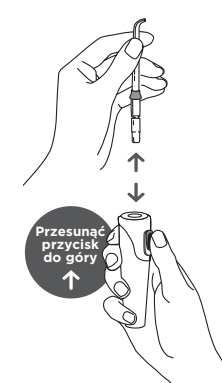


Przygotowanie urządzenia (tylko przy pierwszym użyciu)
Ustawić pokrętko na podstawie urządzenia w położenie „HIGH” (górnę), skierować rączkę i końcówkę do zlewu. WŁĄCZYĆ urządzenie (I) aż woda zacznie płynąć z końcówki. WYŁĄCZYĆ urządzenie (O).



Regulacja ustawienia ciśnienia

Przełączyć pokrętko na podstawie urządzenia do najniższego ustawienia (ustawienie ciśnienia nr 1) dla pierwszego użycia. Stopniowo zwiększać ciśnienie do preferowanego ustawienia - lub zgodnie z zaleceniami stomatologa.

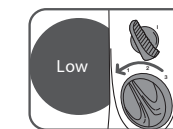

Zalecana technika

Dla uzyskania najlepszych wyników należy rozpocząć od tylnych zębów i przesunąć się w kierunku przednich zębów. Przesunąć końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymać się na chwilę pomiędzy zębami. Kontynuować do wyczyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części zębów górnych i dolnych. Nachylić się nad zlewem. Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł z końcówką umieszczoną w ustach. Delikatnie zamknąć usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale umożliwić wodzie swobodne wypływanie z ust. Ustawić ciśnienie na żądanym poziomie i WŁĄCZYĆ urządzenie (I). Rozpocząć czyszczenie.

Po zakończeniu
WYŁĄCZYĆ urządzenie (O). Opróżnić pozostały płyn w zbiorniku. Odłączyć urządzenie od zasilania.

UWAGA: W przypadku stosowania roztworu do płukania jamy ustnej lub innego niż woda patrz rozdział „Korzystanie z płynu do płukania ust bądź innych roztworów”. (Patrz str 7).

